

重组胰蛋白酶类似物残留检测试剂盒

（一步酶联免疫吸附法）

说明书

货号：1402424

在实验前请完整阅读本说明书，务必重视注意点和常见问题！

版本：A/0

仅供研究用

湖州申科生物技术股份有限公司

■ 产品名称

通用名: 重组胰蛋白酶类似物残留检测试剂盒 (一步酶联免疫吸附法)。

■ 包装规格

96 测试/盒。

■ 预期用途

本试剂盒适用于生物制品制备工艺中残留的重组胰蛋白酶类似物定量测定, 可适用于 Thermo 的 TrypLE™、赛多利斯的 Recombinant Trypsin、Cytiva 的 HyrTryp™ 等酶的残留检测。

该试剂盒仅供研究使用, 不可用于临床。

■ 检测原理

重组胰蛋白酶类似物是一种非动物源高纯度的重组真菌酶, 通过尖孢镰刀菌 DSM2672 发酵生产获得。与胰蛋白酶一样, 可裂解赖氨酸和精氨酸 C-末端上的肽键, 可用于分离多种贴壁哺乳动物细胞, 包括 HEK293、A549、原代人角质化细胞和胚胎干细胞等。

本试剂盒采用重组胰蛋白酶类似物免疫绵羊, 获得特异性多克隆抗体。试剂盒是基于固相酶联免疫吸附分析法 (Enzyme-linked Immunosorbent Assay, ELISA), 采用双抗体夹心的技术形式检测样品中重组胰蛋白酶类似物的残留量。该分析方法通过包被的绵羊多克隆抗体来捕获样品中的残留重组胰蛋白酶类似物, 向酶标板中同时加入校准品 (或待测样品) 和 HRP (Horseradish Peroxidase, 辣根过氧化物酶) 标记的抗体, 温育后进行洗涤; 加入 TMB (3,3',5,5'-四甲基联苯胺) 底物反应, HRP 催化 H_2O_2 氧化 TMB 生成蓝色产物 (最大吸收峰 655 nm), 随后加入终止液终止酶催化反应, 生成黄色产物 (最大吸收峰 450 nm)。酶标仪采集 450 nm 波长下吸光度值, 其吸光度与校准品和样品中的重组胰蛋白酶类似物浓度成正相关。通过剂量-反应曲线可计算得出样品中重组胰蛋白酶类似物的浓度。

对实际样品无需特殊处理, 可通过合适的稀释比例进行适用性验证, 以确定本试剂盒是否适用。本试剂盒检测步骤少, 快速, 专一性强, 性能稳定可靠。

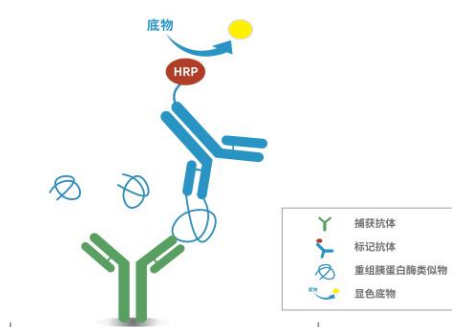


图 1 检测原理示意图

■ 试剂盒组分

表 1 试剂盒组分

组分	产品号	规格	说明
重组胰蛋白酶类似物校准品	PNB009	100 μ L \times 1 管	液体, 澄清透明, 无肉眼可见不溶物。具体含量见瓶身标注。
抗重组胰蛋白酶类似物预包被酶标板	PNA009	8 孔 \times 12 条	已包被适量的绵羊多克隆抗体, 铝箔袋密封包装, 含干燥剂。用完及时密封保存。
稀释液	PNE005	25 mL \times 2 瓶	用于校准品、待检样品和酶标抗体的稀释。初次检测的样品, 需进行样品适用性验证, 确定最佳稀释倍数。
浓缩缓冲液 (10 \times)	PNF001	25 mL \times 1 瓶	低温时易产生结晶, 使用前可在 37 $^{\circ}$ C 水浴中溶解后用新鲜制备的超纯水稀释 10 倍, 即为 1 \times 缓冲液。用于洗板。
重组胰蛋白酶类似物酶标抗体 (100 \times)	PNN003	140 μ L \times 1 管	经 HRP 标记的绵羊多抗, 使用前用稀释液稀释 100 倍。
TMB 显色液	PND002	12 mL \times 1 瓶	使用前于室温平衡 20 分钟以上, 应避光并密封保存。
终止液	PNI002	6 mL \times 1 瓶	为盐酸溶液, 操作时戴好护目镜并避免接触皮肤。
封板膜	PNK001	3 片	用于检测过程中温育时间超过 30 分钟时密封覆盖酶标板条, 防止污染和液体蒸发。

■ 储存条件及有效期

试剂盒（包括开封试剂）置 2-8 °C 保存，有效期为 12 个月。

■ 实验所需但试剂盒中未含材料

- 无菌离心管
- 吸水纸
- 一次性加样槽

■ 相关设备

- 酶标仪（能够检测 450 nm 和 620-650 nm 区间内单一波长的吸光度值）
- 单道或多道的微量移液器
- 微孔板恒温振荡器
- 恒温箱（可选）
- 洗板机（可选）

■ 实验操作流程

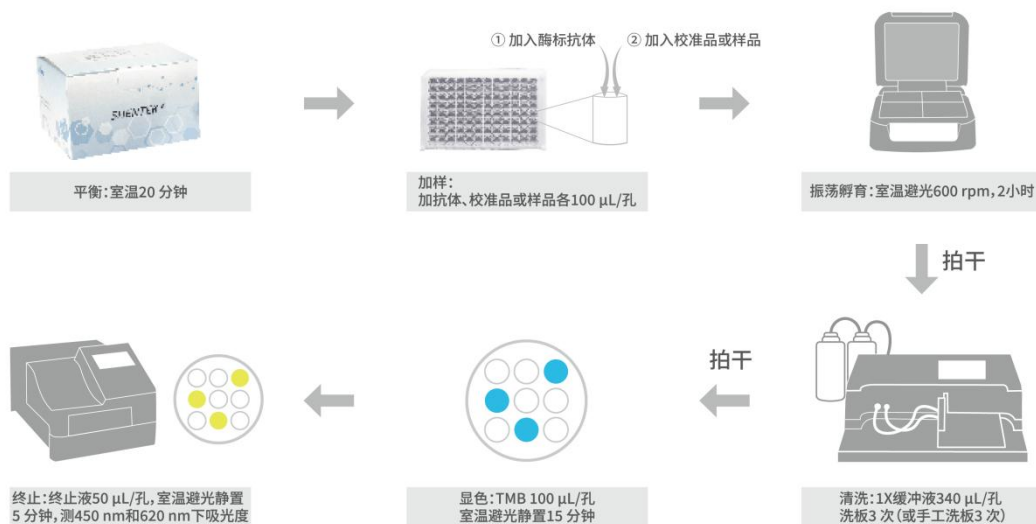


图 2 操作流程示意图

一、试剂、仪器准备

(一) 实验前准备:

1. 将试剂盒取出, 在使用前于室温平衡约 20 分钟。
2. 试剂均需在下步使用前 20 分钟取出于室温平衡, 使用后需立即放回 2-8 °C 保存。
3. 根据检测样品数量计算所需孔数, 取出相应数量的预包被酶标板条, 剩余板条连同干燥剂置于自封袋中密封, 放回试剂盒中, 保存在 2-8 °C 冰箱, 请于效期内使用完。

备注: 室温指 25 °C ± 3 °C。

(二) 试剂配制:

1. 1×缓冲液配制: 浓缩缓冲液 (10×) 用超纯水稀释 10 倍, 例如取 25 mL 浓缩缓冲液 (10×) 加入 225 mL 超纯水混匀, 即为 1×缓冲液, 专用于洗板。建议现配现用。

备注: 取出浓缩缓冲液 (10×) 和稀释液, 观察如有结晶属正常现象, 于 37 °C 温育直至完全溶解。

- 检测抗体配制: 用稀释液于无菌离心管中将其稀释 100 倍, 轻轻颠倒混匀, 即为 1×重组胰蛋白酶类似物酶标抗体。配制合适体积, 以保证加液时有充足的余量。现配现用。
- 校准曲线配制: 参照图 3 和表 2 对校准品进行梯度稀释。

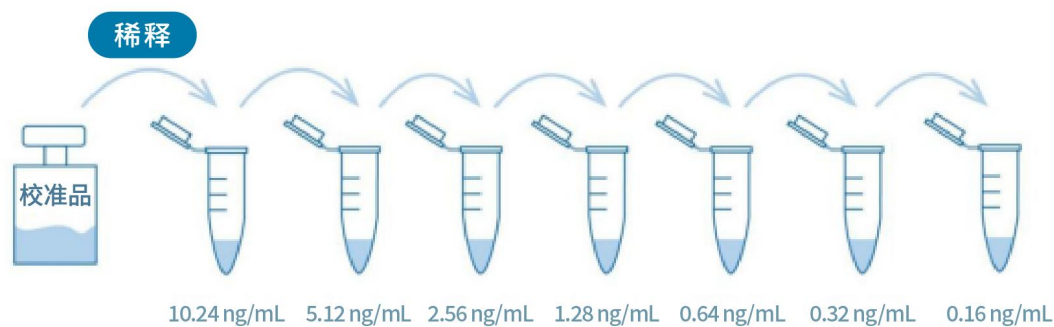


图 3 校准品稀释操作示例

表 2 系列校准品梯度稀释

校准曲线样品	加样	浓度(ng/mL)
ST1	校准品原液用稀释液稀释到 ST1 浓度	10.24
ST2	500 μ L ST1 溶液 + 500 μ L 稀释液	5.12
ST3	500 μ L ST2 溶液 + 500 μ L 稀释液	2.56
ST4	500 μ L ST3 溶液 + 500 μ L 稀释液	1.28
ST5	500 μ L ST4 溶液 + 500 μ L 稀释液	0.64
ST6	500 μ L ST5 溶液 + 500 μ L 稀释液	0.32
ST7	500 μ L ST6 溶液 + 500 μ L 稀释液	0.16
NCS (阴性对照)	稀释液	0

注: 建议先将校准品原液稀释 100 倍, 即 10 μ L 校准品原液加入到 990 μ L 稀释液中混匀。用 100 倍稀释后的校准品配制 ST1。

二、样品准备

- 样品: 细胞收获液, 下游纯化中间样品, 原液和成品等。应清澈透明, 经离心或过滤等方式去除不溶物。
- 存放: 样品务必事先有稳定性的研究, 明确最佳的保存条件; 一般建议样品长期储存应放置于-65 $^{\circ}$ C及以下环境中, 且不宜反复冻融。
- 处理: 待测样品根据其预估所含的重组胰蛋白酶类似物浓度, 用稀释液稀释适当倍数, 使其检测值落入校准曲线定量范围之内。

- 对初次使用或样品重组胰蛋白酶类似物含量未知的情况，强烈建议进行样品适用性验证，确定适宜的样品稀释倍数，以便更好进行后续常规检测。

备注：相关验证方案可咨询我司技术支持。

三、操作步骤

(一) 加样孵育

1. 加入检测抗体：取 1×重组胰蛋白酶类似物酶标抗体溶液到加样槽中，用多通道移液器快速将抗体溶液 100 μL/孔加入微孔板孔底部，勿引入气泡。实际检测时可根据样品数量加样（可参考表 3 示例进行 96 孔板排版）。
2. 加入校准品和待测样品：准确移取 100 μL 系列校准品溶液、稀释液（阴性对照 NCS）、待测样品加入相应微孔板中。操作时避免产生气泡，每个浓度建议做 2-3 个平行复孔，并记录各浓度孔所在位置。
3. 加样完毕后将微孔板用封板膜密封，放置于微孔板恒温振荡器上，室温条件下 600 rpm，避光振荡孵育 2 小时。

表 3 96 孔酶标板加样排版示例

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	NCS	NCS	NCS		S1	S1	S1					
B	ST7	ST7	ST7		S2	S2	S2					
C	ST6	ST6	ST6		S3	S3	S3					
D	ST5	ST5	ST5		S1+SRC	S1+SRC	S1+SRC					
E	ST4	ST4	ST4		S2+SRC	S2+SRC	S2+SRC					
F	ST3	ST3	ST3		S3+SRC	S3+SRC	S3+SRC					
G	ST2	ST2	ST2									
H	ST1	ST1	ST1									

- ◇ 该示例表示的是检测 7 个浓度梯度的校准曲线（ST1-ST7）、1 个阴性对照 NCS、3 个待测样品（S1-S3）和每个样品加标回收 SRC（S1 SRC-S3 SRC）。
- ◇ 实际检测时可根据样品多少，参照此示例进行 96 孔板排版加样。
- ◇ 客户可根据方法验证结果确定日常检测复孔数及是否设置加标回收。

(二) 显色:

1. 提前 20 分钟将 TMB 显色液置于室温条件下平衡。

2. 将上述板子用 1×缓冲液洗板, 340 μL /孔, 迅速甩掉液体, 于纸巾上拍干如此重复洗板 3 次。洗板后的微孔板应立即进行后续操作, 不可放置。
3. 取合适体积的 TMB 显色液于加样槽中, 用多通道移液器迅速将 TMB 显色液 100 μL /孔加入上述微孔板中, 于室温避光温育 15 分钟。此步骤勿用封板膜密封。

(三) 终止

1. 取合适体积的终止液于加样槽中, 用多通道移液器迅速将终止液 50 μL /孔加入上述微孔板中。
备注: 加入顺序需同显色液加入顺序一致, 加样时吸头应悬空, 避免接触微孔板中溶液, 切勿产生气泡。
2. 终止后室温避光静置 5 分钟后读数。

(四) 测读

1. 设定酶标仪波长 450 nm 和 620-650 nm (620-650 nm 区间内单一波长均可), 测定各孔 OD 值。测定时不可覆盖封板膜或盖子。
备注: 若酶标仪没有配备长波长时, 可以仅设定 450 nm 波长, 但是需确保微孔板孔底干净, 无指纹或刮痕。

四、结果计算与判断

(一) 结果计算:

1. 各孔 OD_{450 nm} 数值需减去各自孔的长波长 OD 值。若酶标仪没有配备长波长时, 可以省去此步骤。
2. 各校准点和样品的 OD 值分别减去阴性对照的 OD 值后, 重复孔取均值。
3. 以校准点浓度值和 OD 值进行四参数拟合, 获得校准曲线方程。将样品的平均 OD 值带入方程计算得到样品浓度, 该浓度需乘以稀释倍数得到样品的实际浓度。
4. 标曲的拟合软件可以用酶标仪自带的软件。如无, 则建议采用专业的标曲制作软件, 如 Curve Expert, ELISA Calc 等。

(二) 结果判断 :

1. 对于吸光度值超出校准品 ST1 的样品, 可用稀释液稀释适宜倍数后再行测定, 样品中抗原浓度值为稀释后测定值×稀释倍数。若同时设置在该稀释度下的适宜加标样品, 回收率符合相应法规的方法学验证要求。

(三) 检测方法的局限性:

1. 本品仅适用于研究用途, 不用于临床诊断。
2. 本品仅适用于生物制品下游纯化工艺中重组胰蛋白酶类似物的定量测定。
3. 样品 pH 值应在 6.5~8.5 间, 过低或过高的 pH 值可能会造成测量值异常。

(四) 性能参数:

1. 线性与校准范围: 0.16-10.24 ng/ mL, 线性相关系数 $R^2 > 0.990$ 。
2. 最低定量限 LLOQ: 0.16 ng/ mL。
3. 典型校准曲线如下图:

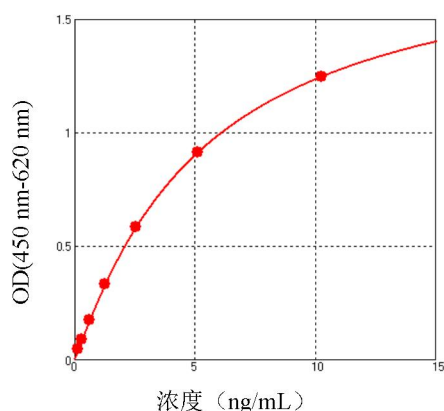


图 4 典型校准曲线

4. 特异性: 与 MDCK、Vero、HEK293、SF9、*E.coli* 宿主蛋白和毕赤酵母宿主蛋白无交叉反应, 与重组人胰蛋白酶、重组牛胰蛋白酶和重组猪胰蛋白酶无交叉反应。

■ 重要事项提醒

试剂盒使用人员需经过培训，合格后方可使用。为了获得满意的检测结果，请您务必事先留意如下几点事项：

- ◇ 所有的试剂配制务必使用无菌一次性的吸头、试管和加样槽等，切勿混用。避免微量移液器吸头连接部分的污染，建议每次实验前后用 75 %酒精擦拭。规范移液操作，严禁液体倒吸到移液器，或未去掉吸头时横放在桌上。
- ◇ 校准品和样品的稀释混匀要轻柔充分，勿产生大量泡沫。
- ◇ **终止液为酸性溶液，在使用中注意眼睛、面部、手和衣服的防护。**
- ◇ 不同批次试剂盒不建议混用。
- ◇ 配制缓冲液所用水需为无菌水或新鲜制备的超纯水，水温不得超过 37 °C。
- ◇ 加样时注意不要有气泡，可轻轻晃动混匀。在上机检测前若有气泡存在，需用干净的 10 μ L 吸头或针头等戳破，注意不要吸走孔内液体，导致结果误差大。
- ◇ 在孵育反应时需给酶标板覆膜，防止样品蒸发。
- ◇ 倒去缓冲液后应马上加后续溶液，勿让酶标孔处于干燥状态，以防影响试剂盒检测性能。
- ◇ 不用的酶标板条需用试剂盒自带的自封铝箔袋避光保存，以免被其他样品污染，导致试剂盒报废。
- ◇ 校准品配制、样品稀释等务必精确，配制时最小的取样量不要小于 5 μ L，防止结果出现较大的误差。
- ◇ 重组胰蛋白酶类似物酶标抗体（100 \times ）请在使用前快速离心，将管盖中残留的试剂甩到管底，防止试剂的污染和损失。
- ◇ 已稀释到工作浓度的校准品、重组胰蛋白酶类似物酶标抗体等因无法保证其稳定性，不建议再次重复使用。
- ◇ 显色液应是无色透明液体。吸取时务必更换干净的吸头，防止 HRP 污染。如发现已有淡蓝色，请弃用。
- ◇ 由于叠氮钠能抑制 HRP 活性，对检测结果有很大影响，因此样品中不能添加叠氮钠。

■ 常见问题分析

若实验结果出现异常,请及时对未使用的酶标板和试剂进行妥善保管,对显色的酶标板实验结果拍照,保留实验原始数据。联系我司技术支持为您解决问题。以下常见的异常现象及解决方法供您参考:

问题描述	可能原因	解决方法
背景信号高	<ol style="list-style-type: none"> 1. 稀释所用的水污染了重组胰蛋白酶类似物; 2. 配液所用移液器、吸头、离心管等耗材污染了重组胰蛋白酶类似物; 3. 校准品稀释过程中造成污染; 4. 洗板操作不规范; 5. 洗板次数不够,加液量不足,浸泡时间不足; 6. 试剂错配。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用无菌或新制备的超纯水稀释; 2. 移液器应专用,并使用无菌带滤芯吸头; 3. 校准品稀释应规范,瓶(管)口切勿触碰移液器外壁,造成管间交叉污染; 4. 手动洗板时移液器吸头应悬空,切勿触及管内液面; 5. 严格按照说明书推荐的加液量、洗板次数和浸泡时间,切勿随意更改; 6. 重组胰蛋白酶类似物酶标抗体(100×)使用时未稀释100倍或稀释错误。
读数后某些孔 OD 值异常偏高	<ol style="list-style-type: none"> 1. 手动洗板过程中,甩液不迅速,或反复多次甩板,造成孔间液体飞溅交叉污染; 2. 手动洗板后,纸巾上拍干时操作不当或未更换新纸巾; 3. 加样操作不当; 4. 温育时未覆盖封板膜; 5. 揭开封板膜时操作不当,导致孔内液体飞溅。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 手动洗板时,甩液应一次完成,快速彻底; 2. 板子拍干用的纸巾是一次性用品,不得重复使用。在纸巾上拍干时,每拍一次更换一个新位置或新纸张,勿使拍痕重叠;若残留液体造成纸巾湿透,应弃去旧纸巾,重新铺就多层纸巾,每洗板一次拍干4-5次为宜; 3. 加样应匀速加于微孔底部,防止加在孔壁上缘,飞溅造成邻近孔污染; 4. 微孔板孵育时应覆盖封板膜防止液体蒸发和污染杂物; 5. 揭开封板膜时,将微孔板平放在水平桌面上,用一只手的拇指和食指紧紧压在板子两侧防止移动,另一只手从一个角匀速揭开封板膜,过程中要始终保持板子不离开桌面,防止孔内液体飞溅。

■ 参考文献

- 中国药典（2020）生物制品通则《生物制品生产用原材料及辅料质量控制》。
- YY/T 1183-2010 酶联免疫吸附法检测试剂（盒）。

生效日期: 2023 年 07 月 18 日

服务支持



湖州申科生物技术股份有限公司

www.shenkebio.com

地址: 浙江省湖州市红丰路 1366 号 6 号楼

Email: Info@shenkebio.com

电话: 0572-2165910